


Quick guide LoFric Elle katetre

Scan for
detaljerede
instruktioner

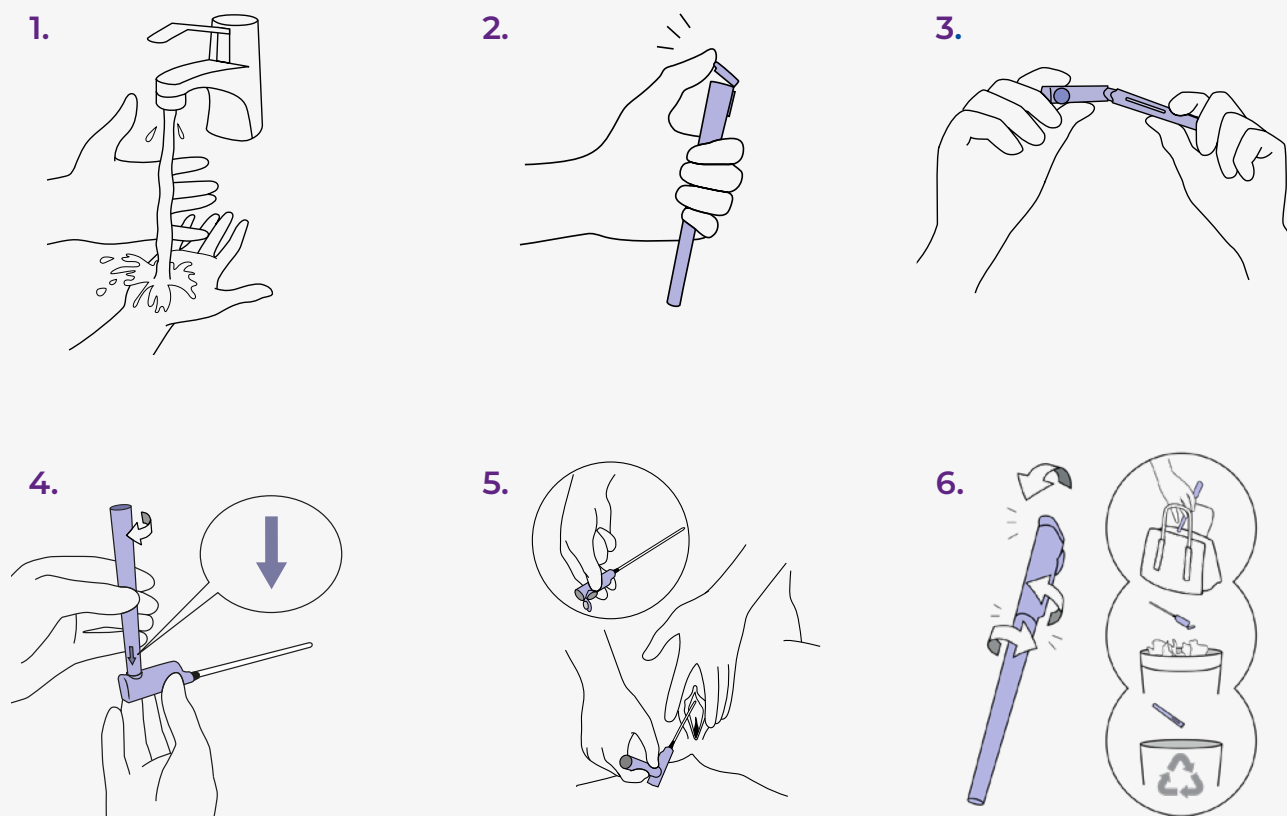

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
2. Bryd den øvre sterile barriereåbning.
3. Hold katetret og bøj forsigtigt den øvre barriereåbning. Træk katetret ud.
4. VALGFRIT: Katetret kan anvendes med eller uden håndtaget. Håndtaget giver ekstra rækkevidde og en mere hygiejnisk kateterisering. Fastgør beholderen til katetret med et enkelt klick. Sørg for at pilene på beholderen peger nedad.
5. Vip dit bækken fremad, spred kønslæberne, træk forsigtigt opad. Urinrøret findes lige over vaginalåbningen. Brug den anden hånd til langsomt at

indføre kateteret i urinrørsåbningen, indtil urinen begynder at strømme, og indfør den lidt mere for at sikre, at begge kateterhuller er inde i blæren.

Når urinstrømmen bliver til dryp, skal du trække kateteret langsomt ud. Hvis urinen begynder at strømme igen, skal du stoppe udtrækningen og vente, indtil urinstrømmen stopper for at sikre en fuldstændig blæretømning.

6. Sæt kateteret tilbage i den nederste beholder. Smid det ud, eller transporter det i tasken, indtil du kan smide det ud. Bemærk venligst! Beholderen er genanvendelig.

Vigtig information

LoFric® Elle™ hydrofilt engangskateter til blæretømning med saltvandsopløsning til aktivering.

Til kvindelige brugere; voksne, unge og børn.

Til kort- og langvarig blærebehandling med intermitterende urinkateterisering.

LoFric katetre er kun til brug på bevilling.

Sørg for at følge råd og oplæring i kateteriseringsproceduren fra sundhedspersonalet inden brug.

Se venligst brugsanvisningen i pakken, for vigtig information og komplette instruktioner.

Kontakt den ordinerende læge, hvis du oplever problemer.

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære- og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt till et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimafottrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://wellspect.dk).

Deltag i samtalerne på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Denmark. Tel: +45 4362 4332.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only