


LoFric Origo Pro katetre – quick guide

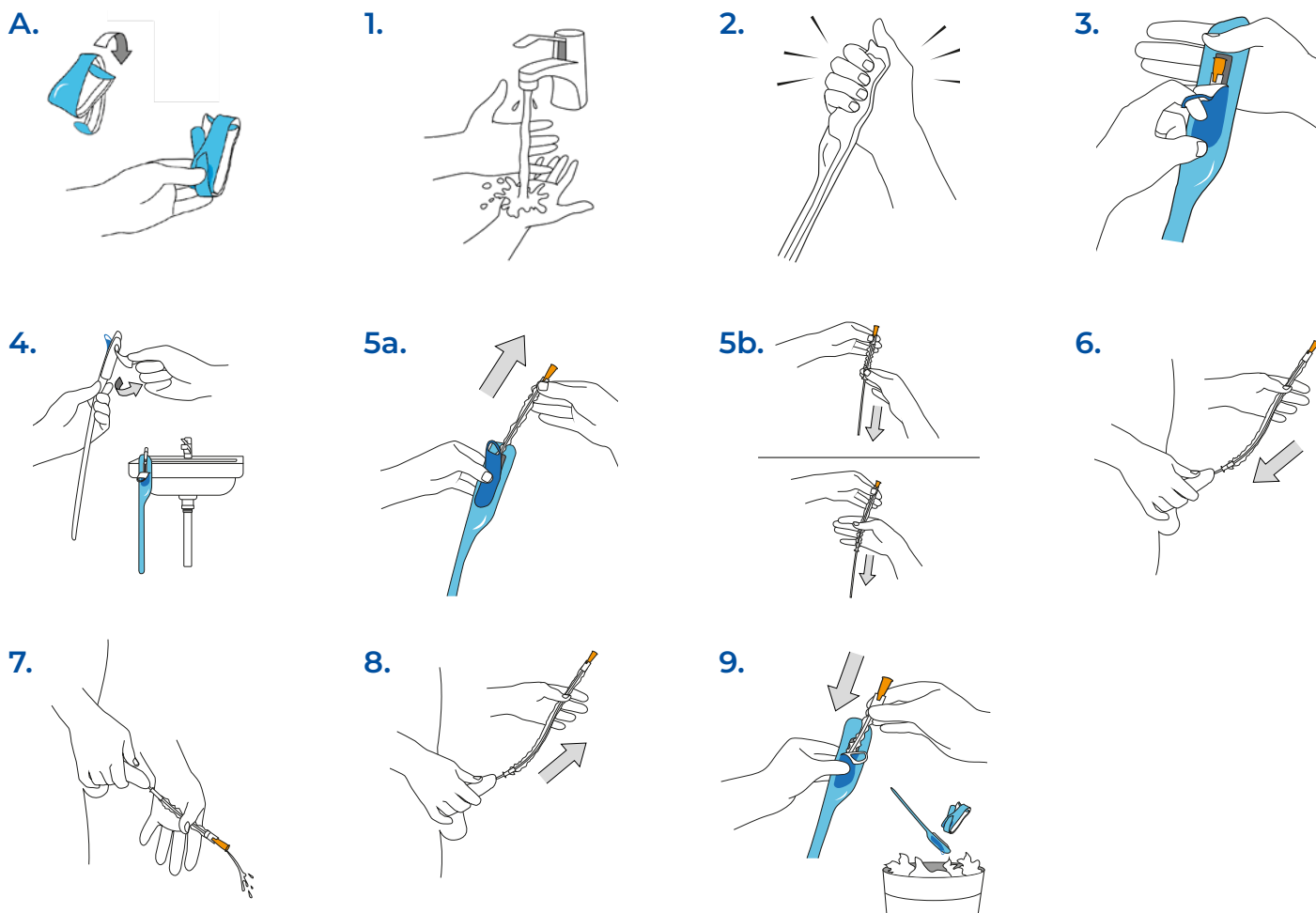

A. Gode råd til opbevaring før brug. Kan foldes sammen til lommestørrelse. Brug slidsen til at holde katetret foldet.

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
2. Klem for at aktivere saltvandsopløsningen, hvorefter katetret er klar til brug.
3. Brug løkken til at trække ned og åbne.
4. Valgfrit: Brug den selvklæbende strimmel på bagsiden for at fastgøre produktet på en tør, ren overflade.
5. A. Efter åbning skal du forsigtigt klemme og holde på håndtaget for automatisk at trække beskyttelsesgrebet ned, når du tager katetret ud. Brug beskyttelsesgrebet til at styre indføringen, uden at det er nødvendigt at berøre kateterslangen.

B. Valgfrit: Tag katetret ud. Træk håndtaget ned for at dække kateterslangen. Brug beskyttelsesgrebet til at styre indføringen, uden at det er nødvendigt at berøre kateterslangen.

6. Løft penis op mod maven for at rette urinrøret ud. Før langsomt katetret ind i urinrøret. Når urinen begynder at løbe, skal du føre kateteret lidt længere ind for at sikre en jævn strøm.
7. Vend penis nedad, når urinen begynder at løbe gennem katetret.
8. Vent, indtil urinen stopper med at løbe, for at sikre, at urinblæren tømmes helt. Træk langsomt kateteret ud.
9. Læg katetret tilbage i indpakningen, og kassér det på korrekt vis (de lokale bestemmelser kan variere).

VIGTIG INFORMATION

Brug kun den vedlagte saltvandsopløsning til at aktivere katetret med.

Placér ikke katetret på papir eller stof, da disse materialer kan absorbere den våde belægning.

Vigtig information

LoFric[®] Origo[™] Pro, Engangs, hydrofil kateter, med saltvandsopløsning til aktivering, og multiple kateterøjne, designet til at muliggøre fuldstændig blæretømning uden behov for repositionering.

Til kort- og langvarig blærebehandling med intermitterende urinkateterisering.

Til voksne og unge.

LoFric katetre er kun til brug på bevilling.

Sørg for at følge råd og oplæring i kateteriseringsproceduren fra sundhedspersonalet inden brug.

Se venligst brugsanvisningen i pakken, for vigtig information og komplette instruktioner.

Kontakt den ordinerende læge, hvis du oplever problemer.

Hos Wellspect udvikler vi innovative produkter og løsninger, der gør en reel forskel for mennesker med behov for kontinenspleje – så de kan leve livet fuldt ud, hver dag. Vi har været førende inden for sundhedssektoren i over 40 år med vores varemærker LoFric[®], Navina[™] og Surity[™]. Vi arbejder løbende på at gøre vores brugervenlige løsninger tilgængelige for endnu flere, samtidig med at vi bestræber os på at opretholde de højeste kvalitetsstandarder og samtidig minimere klimaaftrykket fra vores produkter. Gennem et tæt samarbejde med brugere og sundhedspersonale stræber vi efter at forbedre kliniske resultater og øge livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Wellspect. A Real Difference.

For mere information om vores produkter og tjenester, besøg wellspect.dk

Følg os også på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect ApS, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Denmark. Tlf: +45 4362 4332.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only