

## LoFric Elle - kvinde

LoFric® Elle™ hydrofilt engangskateter til blæretømning med saltvandsopløsning til aktivering.

Til kort- og langvarig blærebehandling med intermitterende urinkateterisering.

LoFric katetre er kun til brug på bevilling.


Sørg for at følge råd og træning i kateteriseringsproceduren fra sundhedspersonalet inden brug.

Se venligst brugsanvisningen i pakken, for vigtig information og komplette instruktioner.

Kontakt den ordinerende læge, hvis du oplever problemer

### BRUGSANVISNING

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe.
2. Bryd den øvre sterile barriereåbning.
3. Bryd den nedre sterile barriere ved at holde på den katetret og a) drej eller tvist forsigtigt den øverste del fra side til side (billede b eller c). d) Hold produktet lodret og træk katetret lige op af plasthåndtaget.
4. Tøm beholderen for den resterende væske (i toiletet eller vasken).
5. VALGFRI: Ved at fastgøre beholderen til den øverste del kan den bruges som et håndtag.
6. Vip dit bækken fremad, spred kønslæberne, træk forsigtigt opad. Urinrøret findes lige over vaginalåbningen. Brug den anden hånd til langsomt at indføre kateteret i urinrørsåbningen, indtil urinen begynder at strømme, og indfør den lidt mere for at sikre, at begge kateterhuller er inde i blæren.
7. Når urinstrømmen bliver til dryp, skal du trække kateteret langsomt ud. Hvis urinen begynder at strømme igen, skal du stoppe udtrækningen og vente, indtil urinstrømmen stopper for at sikre en fuldstændig blæretømning.
8. Sæt kateteret tilbage i den nederste beholder. Smid det ud, eller transporter det i tasken, indtil du kan smide det ud. Bemærk venligst! Beholderen er genanvendelig.

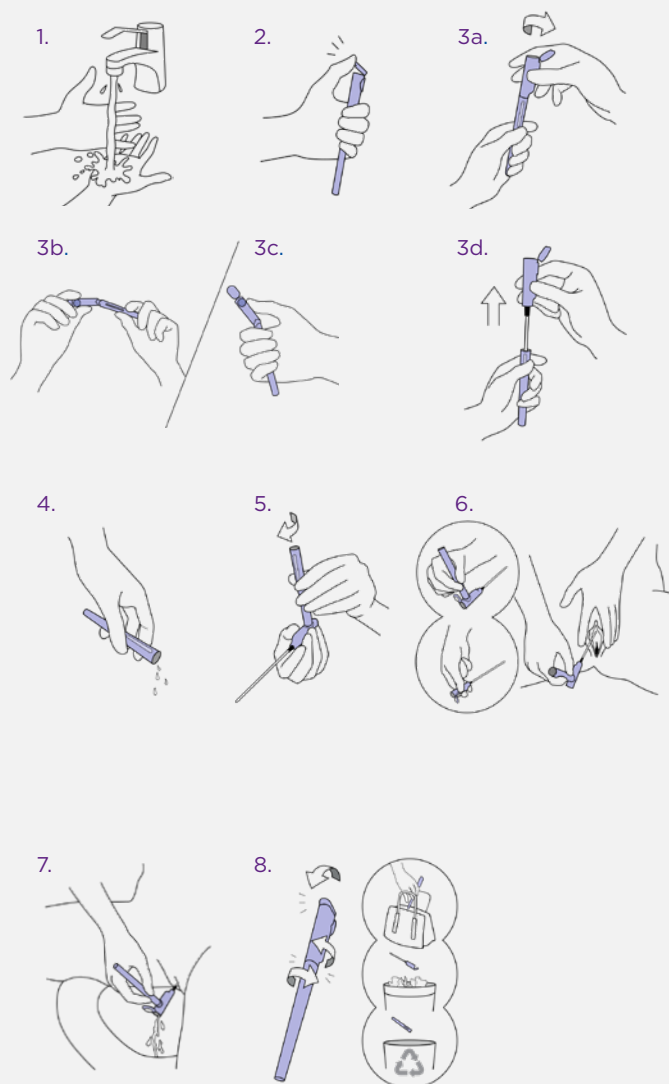

Hos Wellspect udvikler vi innovativ kontinenspleje, der ændrer menneskers liv. Vi er forpligtet til at hjælpe vores brugere til at opbygge selvtillid og uafhængighed, samt et godt helbred og velvære. Vi har været førende i branchen i over 30 år med vores produkt brands LoFric® og Navina™. Vi skaber pålidelige og brugervenlige produkter til blære- og tarmproblemer med så lille miljøpåvirkning som muligt. Vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale og arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale, der konstant inspirerer os til at forbedre vores produkter og tjenester, på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

**Wellspect. En reel forskel.**

For mere information om vores produkter og vores initiativer for at fremme kontinenspleje sammen Advancing Continence Care Together (ACCT), kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtaler på Facebook og Instagram.

[wellspect.dk](https://www.wellspect.dk)



LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only