

LoFric Elle Pro

– Produktdatablad

LoFric® Elle™ Pro, et hydrofilt engangskateter med multiple kateterøjne designet til fuldstændig blæretømning uden repositionering af katetret.

Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med bestråling. Information om sidste anvendelsesdato er trykt på pakningen.

Pakning

30 katetre pr. æske. 2 æsker i hver transportkarton.

5 katetere per prøveæske.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaseret elastomer (POBE).

Væske: Produktet ligger i vandbaseret væske med glycerol.


Enkelt pakning: Polypropylen.

Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse	Antal kateterøjne
419 10 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 10	12
419 12 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 12	12
419 14 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 14	12

Alle produkter fås i prøvepakker med 5 katetre. Der bestilles ved at erstatte de sidste to cifre i referencenummeret med 05.

*Effektiv længde er længden på kateterrøret, der kan føres ind i urinrøret.

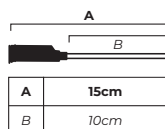

LoFric Elle Pro



- **LoFric Elle Pro multiple kateterøjne** er designet til fuldstændig blæretømning uden repositionering af katetret.¹
- **Forbedring af succesraten** ved kateterisering – det L-formede håndtag forbedrer synligheden ved brug af et spejl og gør det lettere at lokalisere urinrøret. Det understøtter også en mere oprejst, naturlig stilling under kateterisering.
- **L-formet håndtag** for et godt greb, ekstra rækkevidde og non-touch teknik.
- **Klart til brug** med det samme – for hurtig håndtering og kateterisering.
- **Glatte kateterhuller.**
- **Frit for PVC, ftalater og latex.**
- **LoFric katetre har** vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret forbliver glat og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud.^{2,3}
- **Den nederste del** af beholderen er genanvendelig plast (polypropylen).

Referencer

1. Data on file.
2. Waller et al., Spinal Cord, 1997.
3. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988.

Hos Wellspect udvikler vi innovative produkter og løsninger, der gør en reel forskel for mennesker med behov for kontinenspleje – så de kan leve livet fuldt ud, hver dag. Vi har været førende inden for sundhedssektoren i over 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vi arbejder løbende på at gøre vores brugervenlige løsninger tilgængelige for endnu flere, samtidig med at vi bestræber os på at opretholde de højeste kvalitetsstandarder og samtidig minimere klimaaftrykket fra vores produkter. Gennem et tæt samarbejde med brugere og sundhedspersonale stræber vi efter at forbedre kliniske resultater og øge livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Wellspect. A Real Difference.

For mere information om vores produkter og tjenester, besøg wellspect.dk
Følg os også på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Denmark. Tel: +45 4362 4332.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

